

# Руководство пользователя Люмифлекс Cloud

Для аккаунта пациента

# Содержание

|   |                                                                      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Предполагаемое использование облачного сервиса Люмифлекс Cloud ..... | 1  |
| 2 | Системные требования и меры предосторожности .....                   | 2  |
| 3 | Регистрация в облачном сервисе .....                                 | 3  |
| 4 | Вход в аккаунт после регистрации .....                               | 5  |
| 5 | Главная страница .....                                               | 6  |
| 6 | Формирование отчета AGP .....                                        | 8  |
| 7 | Настройка обмена данных об уровне глюкозы .....                      | 10 |
| 8 | Настройки личного профиля .....                                      | 14 |

# Предполагаемое использование облачного сервиса Люмифлекс Cloud

**Люмифлекс Cloud** предназначен для использования пациентами с диабетом, их опекунами и лечащими врачами с целью просмотра, анализа и оценки данных с устройств при мониторинге глюкозы для поддержки эффективного управления диабетом.

## Дополнительно



Люмифлекс Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации.



Люмифлекс Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом.



Домашние пользователи должны проконсультироваться с медицинским работником перед любой медицинской интерпретацией и корректировкой терапии на основе информации, содержащейся в программном обеспечении.

# Системные требования и меры предосторожности

- 
- Обеспечьте оптимальную производительность и безопасность с помощью правильной настройки.

## Системные требования

-  **Поддерживаемые браузеры.** Веб-приложение Люмифлекс Cloud разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для обеспечения полной функциональности необходимо включить JavaScript и разрешить всплывающие окна.
-  **Поддерживаемые операционные системы.** Приложение протестировано для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).
-  **Минимальные аппаратные/программные требования.** Для оптимального отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 1920 × 1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить стабильное интернет-соединение.

## Критические меры предосторожности

1. **Подключение.** Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен поддерживать стабильное интернет-соединение.
2. **Риски передачи данных.** Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью могут привести к задержке или сбою передачи данных опекунам.
3. **Питание.** Обеспечивает стабильное питание во время подключения устройства и обработки данных. Не следует использовать платформу при низком уровне заряда батареи.
4. **Серьезные инциденты.** Немедленно сообщите производителю и соответствующим органам о любых серьезных травмах или смертельных случаях, связанных с устройством.



# Регистрация в облачном сервисе




[cloud.люмифлекс.рф](https://cloud.люмифлекс.рф)



## Процесс регистрации

1. Перейдите на вкладку «Пациент» и нажмите «Зарегистрироваться».
2. Выберите тип профиля «Пациент» и нажмите «Продолжить».
3. Введите данные, связанные со здоровьем.

4. Установите предпочтительные единицы измерения и пороговые значения BG (глюкозы в крови).

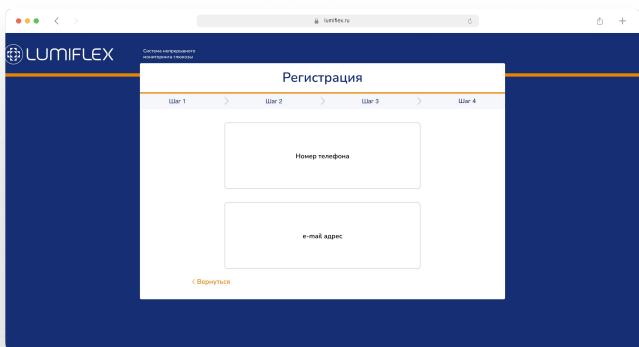

5. Выберите способ регистрации:  
с использованием номера  
мобильного телефона или адреса  
электронной почты.
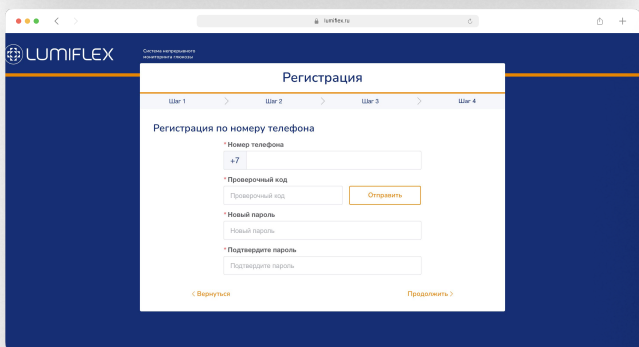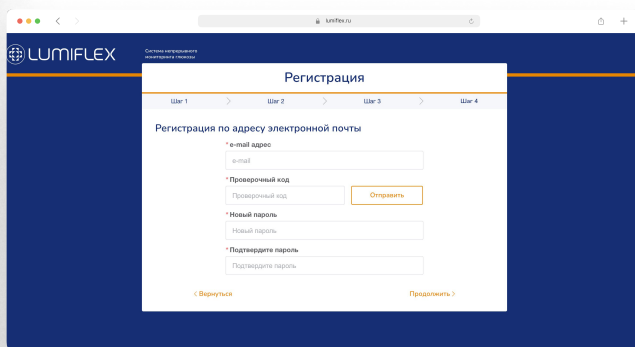
## Регистрация по номеру телефона

1. Введите номер телефона.
2. Нажмите кнопку **«Отправить»**.  
Вам поступит СМС с кодом.  
Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.

## Регистрация по адресу электронной почты

1. Введите ваш имейл-адрес.
2. Нажмите на кнопку **«Отправить»**. Вам поступит письмо с кодом. Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.




**Обратите внимание!** Для регистрации в приложении используйте только **русский номер** мобильного телефона.

После ввода данных завершите регистрацию путем ввода кода верификации и установки пароля. Теперь вы можете войти в систему.

# Вход в аккаунт после регистрации

1. Выберите вкладку «Пациент».
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».
3. Введите адрес электронной почты / номер телефона и пароль.
4. Нажмите кнопку «Вход в личный кабинет» для продолжения.

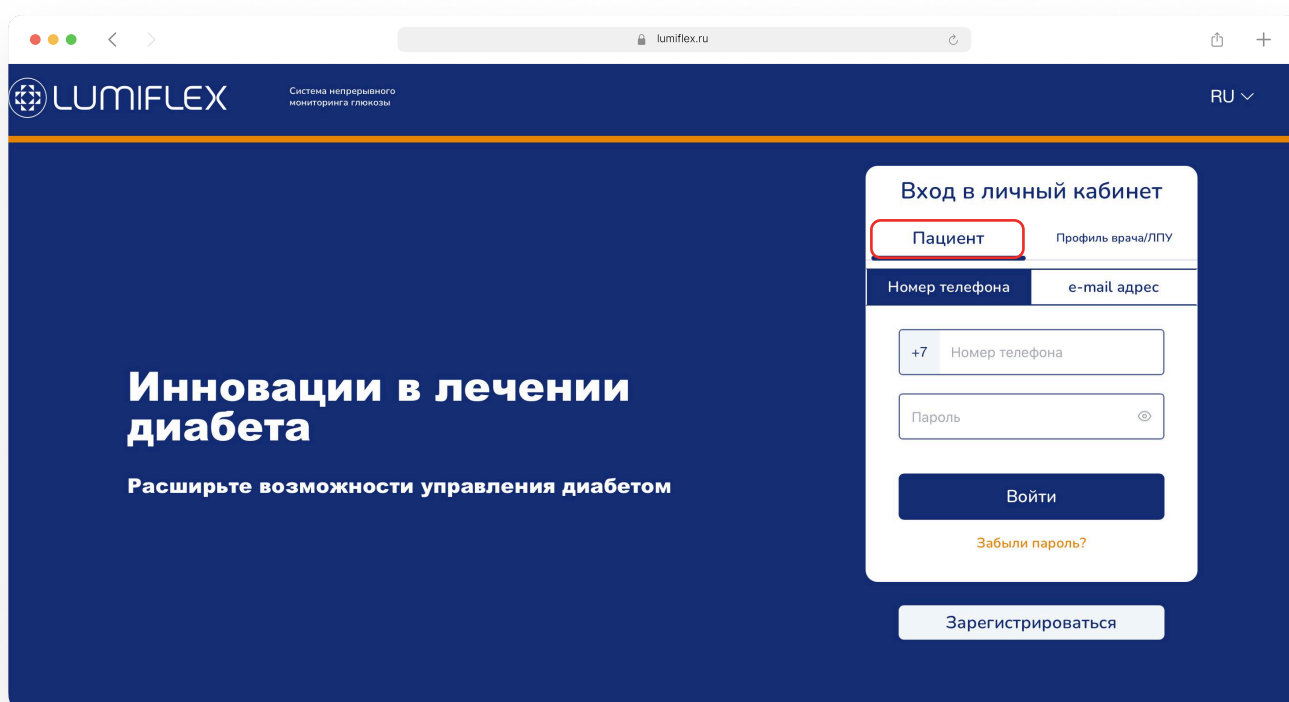
[Забыли пароль?](#)

RU ▼

## Забыли пароль


1. Нажмите кнопку «Забыли пароль» и следуйте инструкциям для его сброса.
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».

## Сменить язык


Выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов.

# Главная страница

## История отчетов

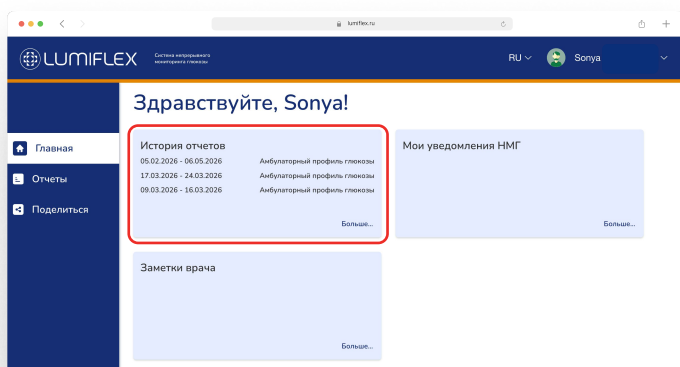

1. Нажмите на карточку **«История отчетов»** для быстрого обзора всех ваших прошлых записей о сгенерированных отчетах.

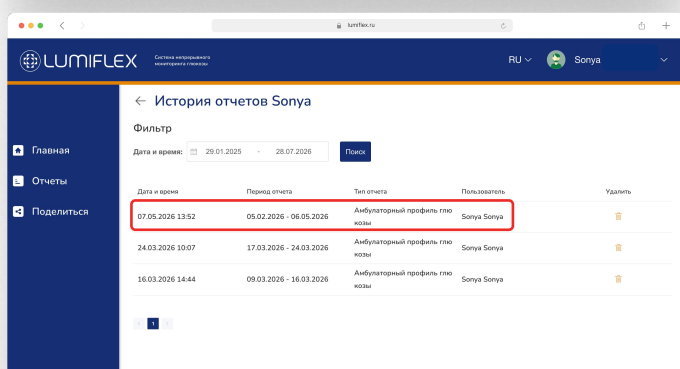


2. Просто щелкните в любой области строки выбранного отчета, чтобы открыть отчет и получить доступ к его содержимому.

## Примечание

После установления связи между пациентами и врачами все отчеты, независимо от того, были ли они сгенерированы пациентами или врачами, могут быть просмотрены на этой странице.

## Быстрый выбор


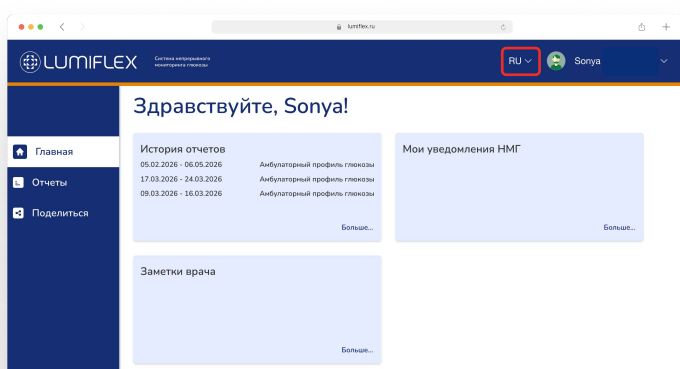


Поддерживает быстрый выбор языка и единиц измерения.


# Главная страница

## Заметки врача


Нажмите на карточку **«Заметки врача»** для быстрого обзора всех прошлых заметок вашего врача.

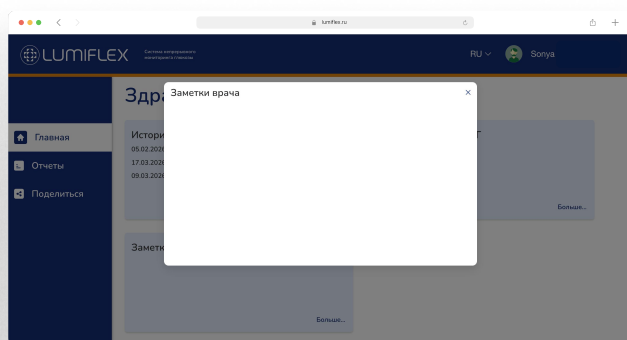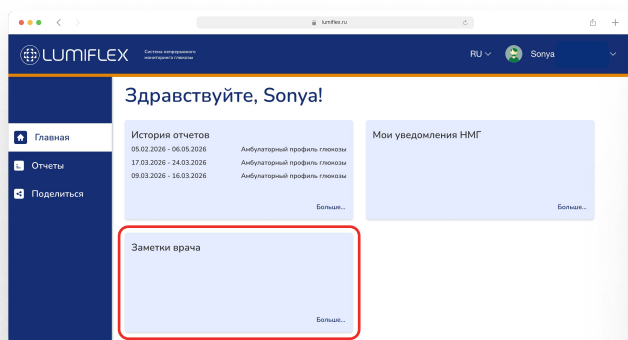

## Уведомления подписчиков

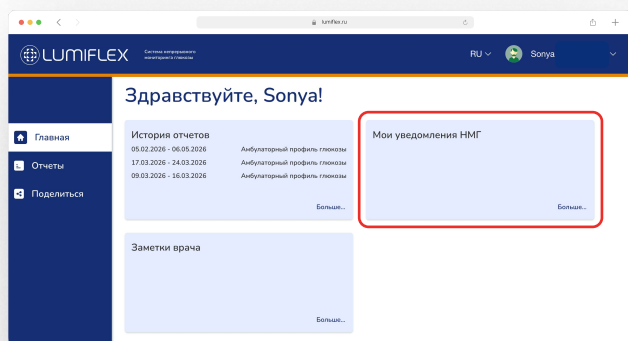


1. Нажмите на карточку **«Мои уведомления НМГ»** для быстрого обзора всех прошлых записей об оповещениях.

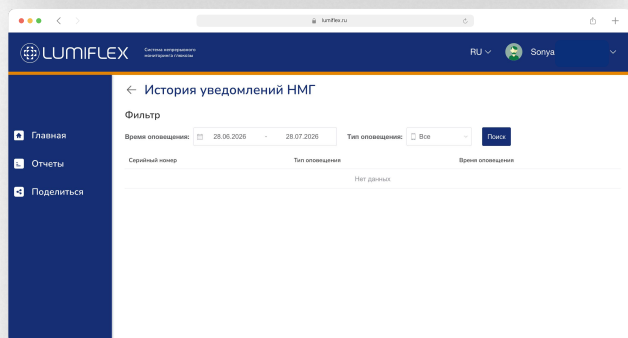


2. Используйте **«Тип оповещения»** и **«Время оповещения»** в качестве условий фильтрации для генерации списка оповещений.

# Формирование отчета AGP

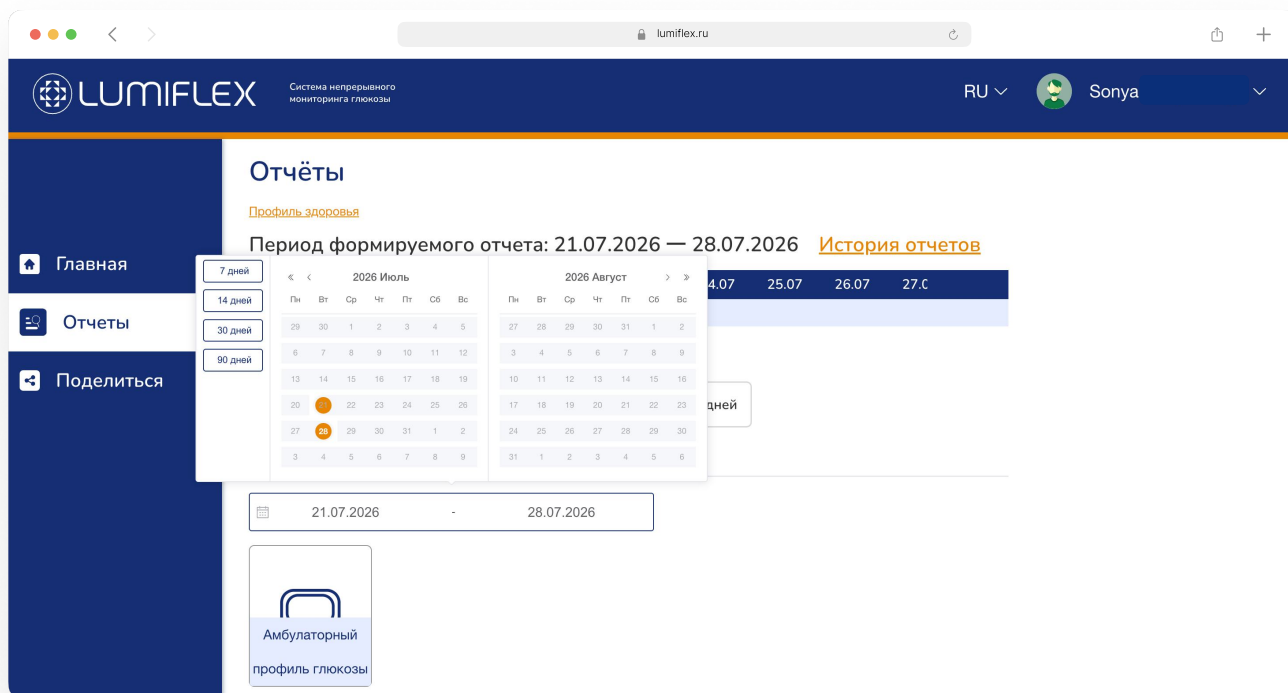

## Выбор временного интервала

1. Нажмите на вкладку «Отчеты» слева.
2. Выберите предустановленные диапазоны (7, 14, 30, 90 дней) или настраиваемый период времени.
3. Нажмите «Создать отчет» для комплексного анализа данных.

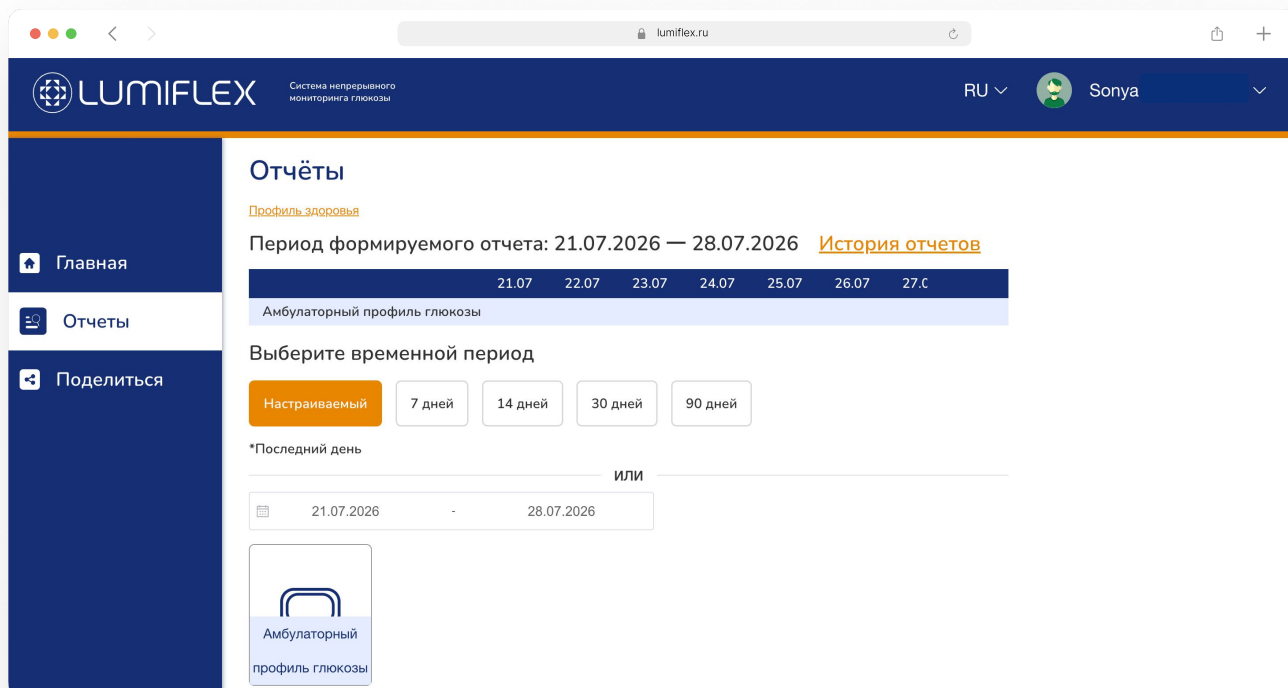



# Формирование отчета AGP

## История отчетов

Отчет AGP поддерживает интеграцию загруженных данных CGM.


## История отчетов

Позволяет просматривать ранее сгенерированные отчеты, что помогает быстро открыть их без повторной генерации. Звездочка (\*) рядом с именем отчета указывает на то, что отчет был сгенерирован врачом или кем-то другим от вашего имени, а не вами.

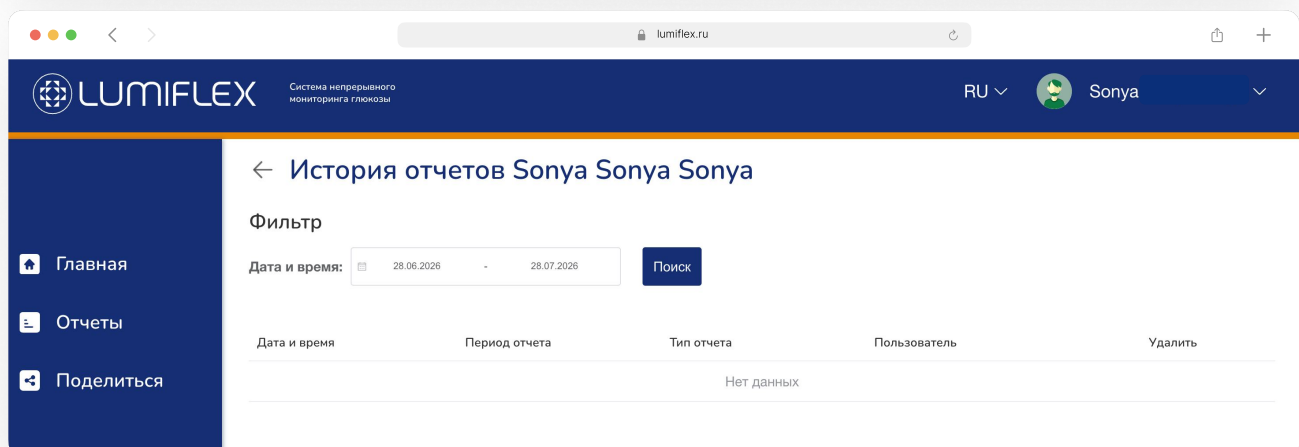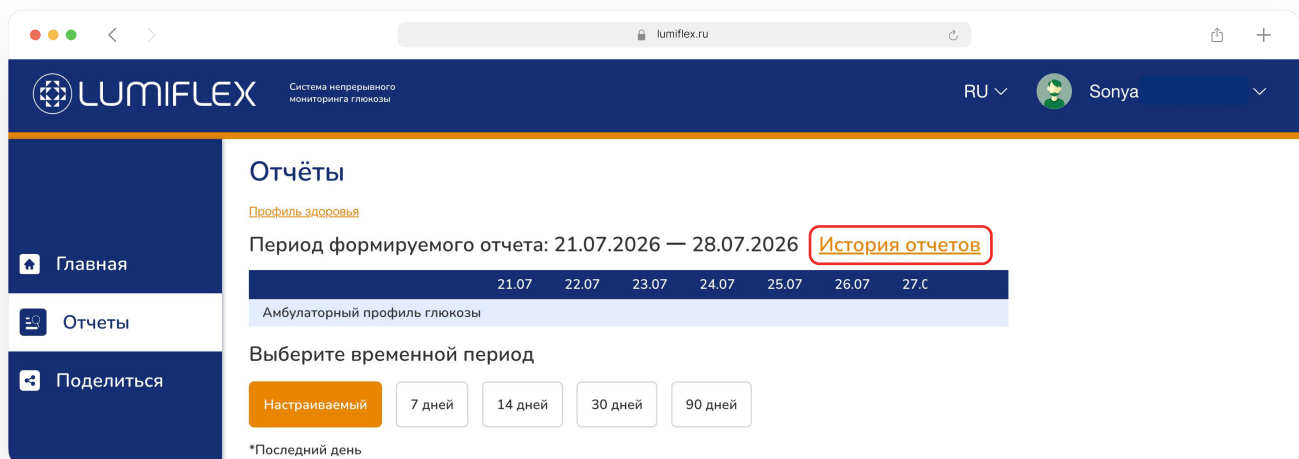



# Настройка обмена данными об уровне глюкозы

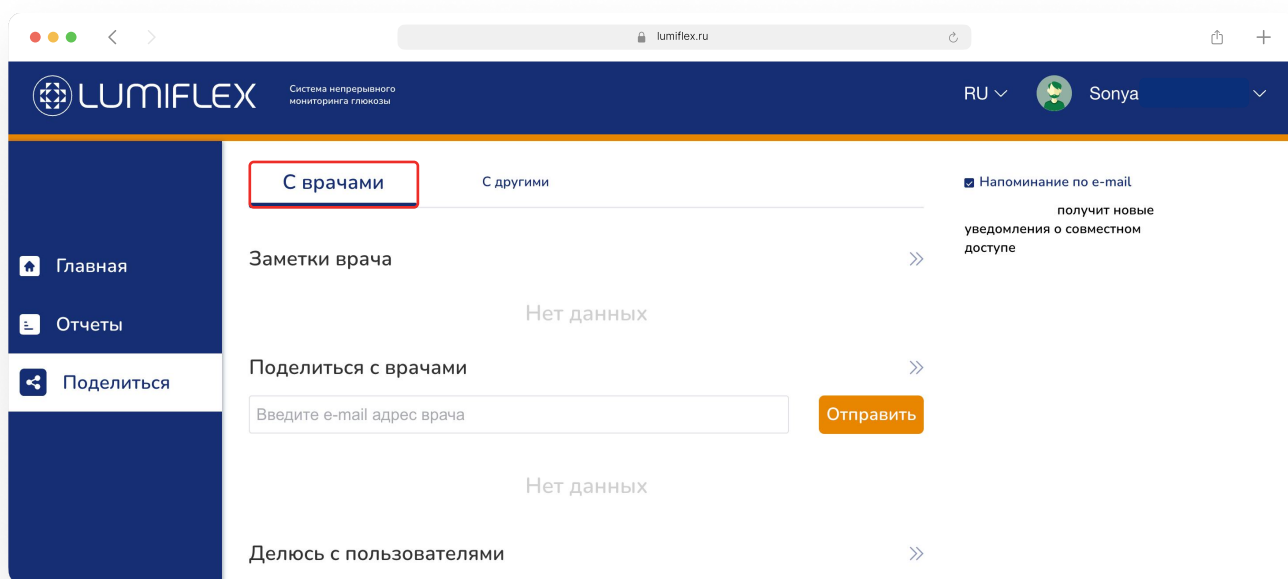


## С врачами

- ✓ Функция «**Заметки врача**» позволяет просматривать сообщения или заметки, оставленные вашим врачом.
- ✓ Вы можете найти адрес электронной почты вашего врача и отправить приглашение. После согласия врача он может помочь вам загружать данные или генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как учетная запись врача.
- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с врачом, нажав кнопку «**Удалить**».

Ваш врач может сам инициировать обмен данными через свой аккаунт в облачном сервисе. В этом случае вам на телефон поступит СМС, где вы подтверждаете свое согласие на обмен данными. Также разрешить обмен данными с врачом можно через приложение Lumiflex LinX.



# Настройка обмена данными об уровне глюкозы

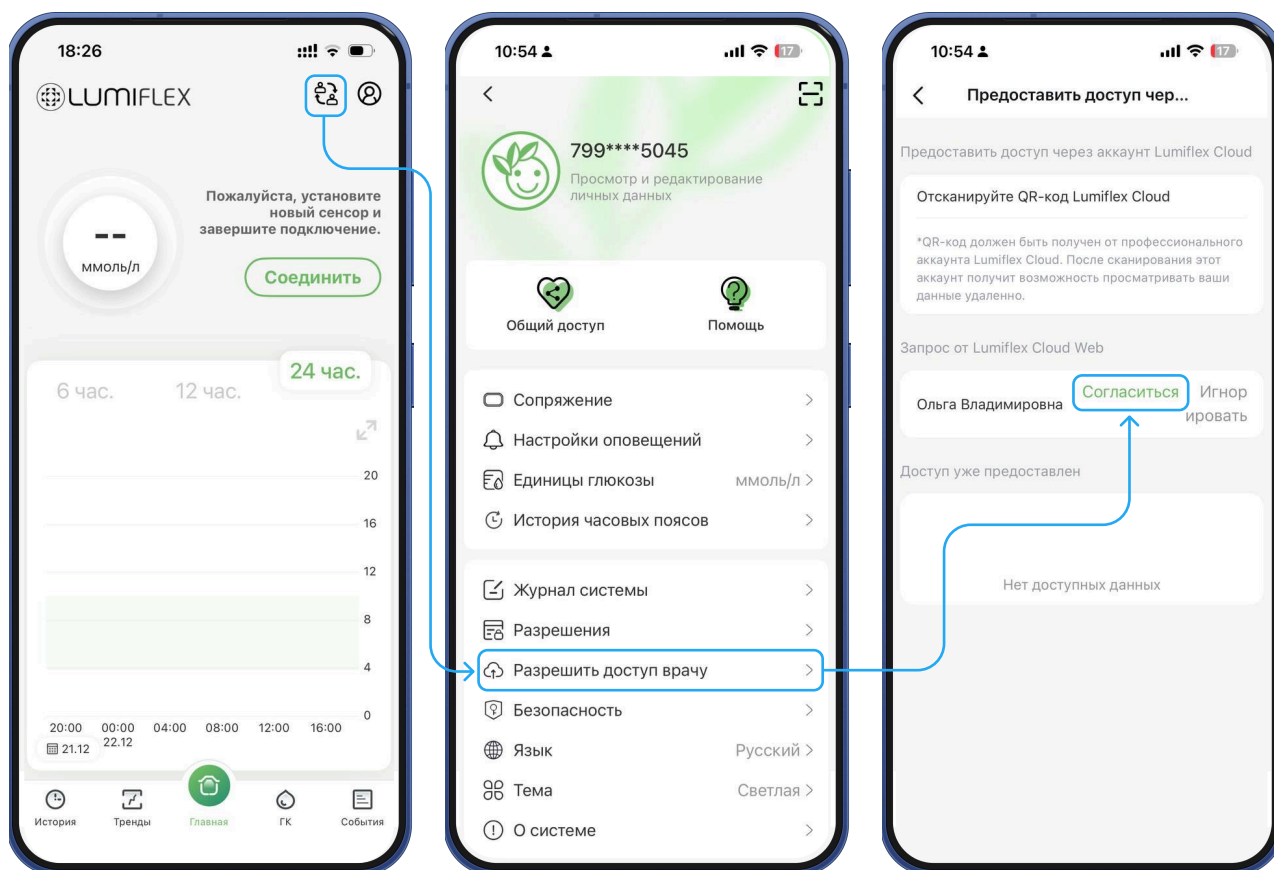


1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.
2. Выберите **«Разрешить доступ врачу»**.
3. Нажмите **«Согласиться»**.



После того как вы нажмете «Согласиться» в приложении, врач сможет просматривать ваши данные на платформе Люмифлекс Cloud.

# Настройка обмена данными об уровне глюкозы


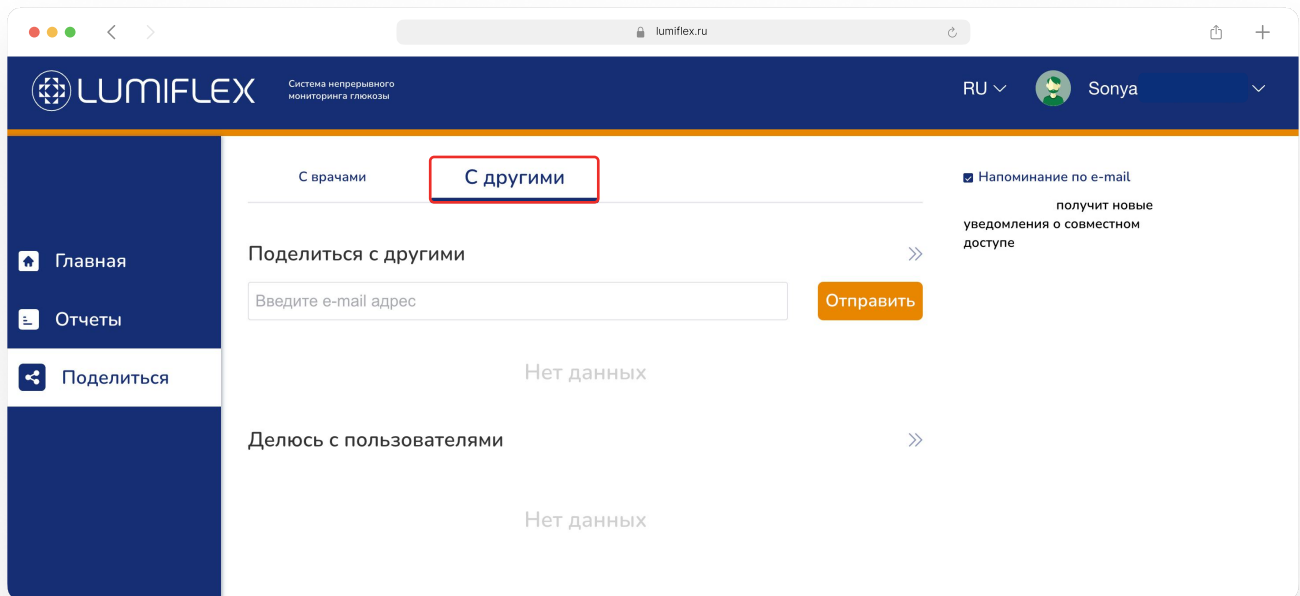


## С другими пользователями

- ✓ Вы можете найти электронную почту других пользователей и отправить приглашение. После согласия других пользователей они смогут генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как личная учетная запись.
- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с другими пользователями, нажав кнопку **«Удалить»**.

# Настройка обмена данными об уровне глюкозы


Разверните страницу «Запросы от меня» в разделе «Делюсь с пользователями» и просмотрите список разрешений, предоставленных другими. Щелкните по любому полю, чтобы войти в центр отчетов другого человека, где вы можете просматривать статистические данные и другие записи, которые он загрузил.

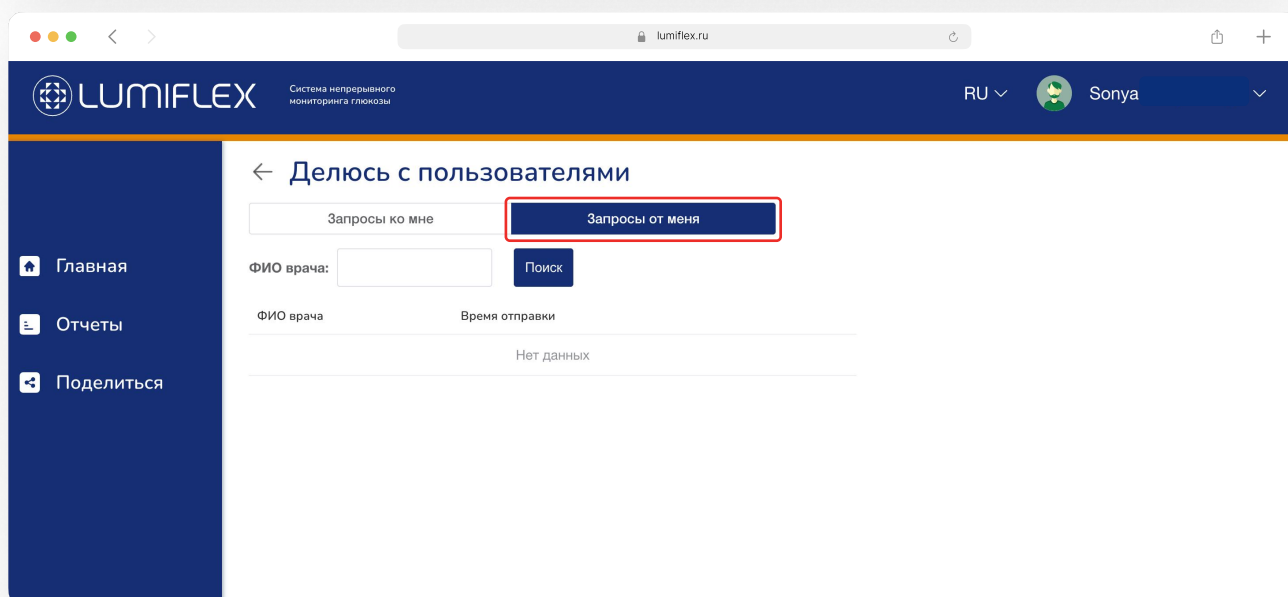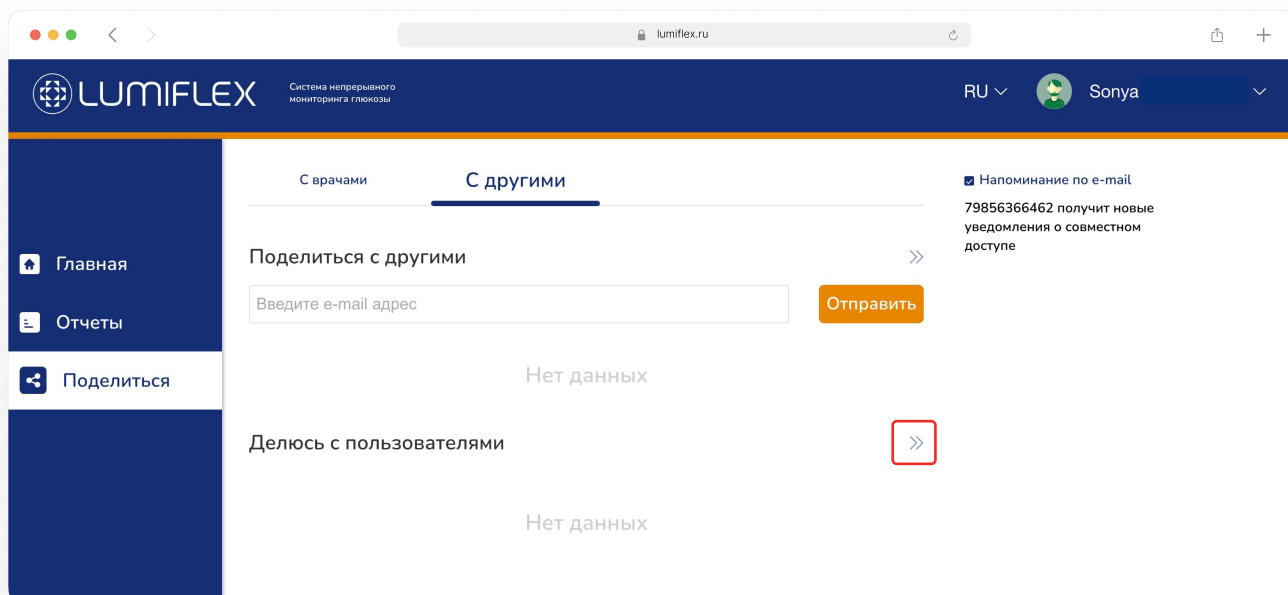


# Настройки личного профиля

## Настройки учетной записи

1. Нажмите здесь, чтобы быстро перейти на страницу личных настроек.

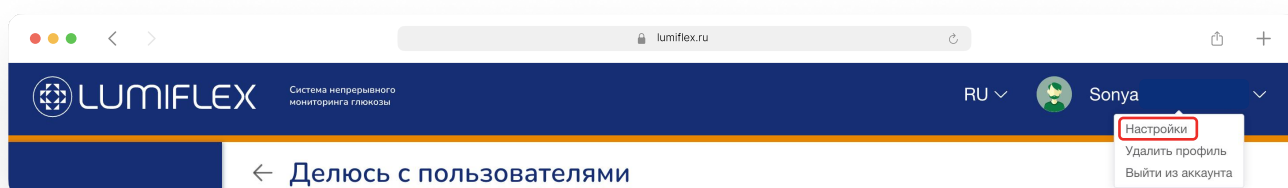


2. Нажмите на кружок, чтобы изменить фотографию профиля.

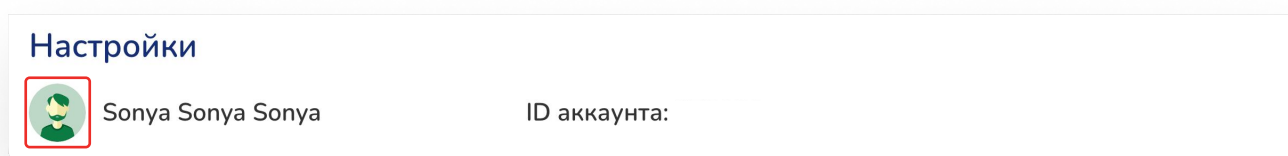

## Настройки учетной записи


Вкладка «Аккаунт» позволяет менять информацию, связанную с учетной записью.

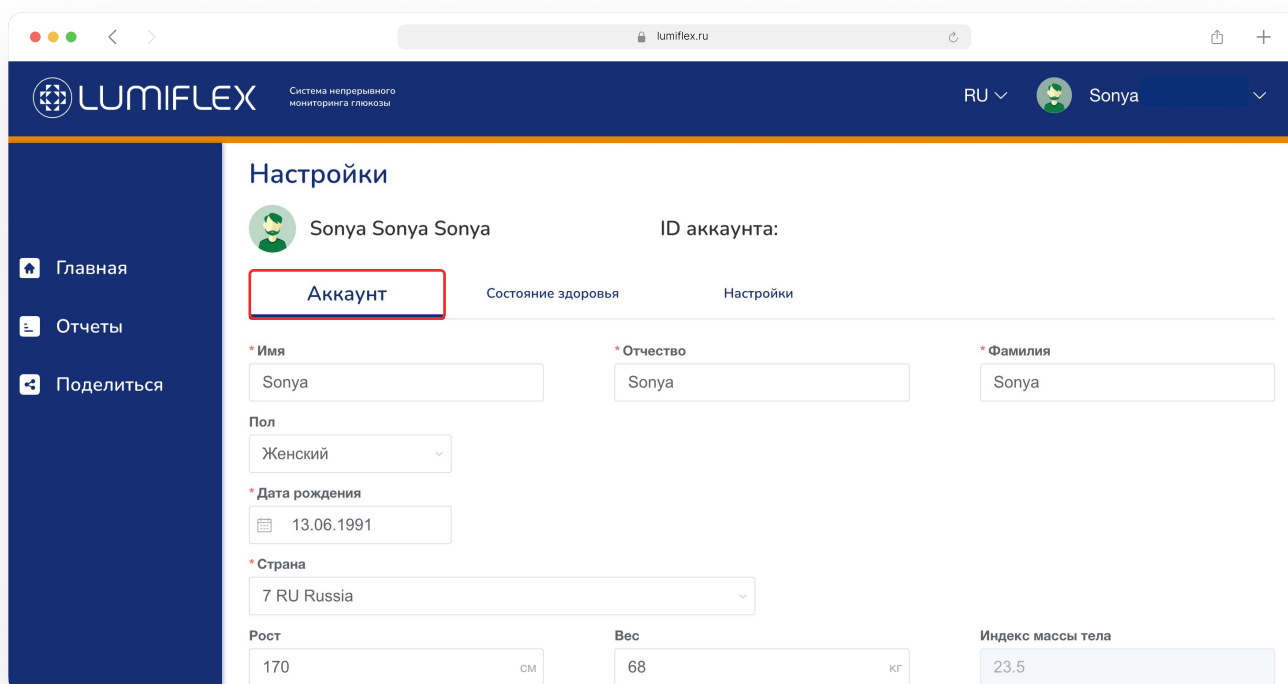

# Настройки личного профиля

## Настройки профиля здоровья

Вкладка «Состояние здоровья» позволяет менять информацию, связанную со здоровьем.

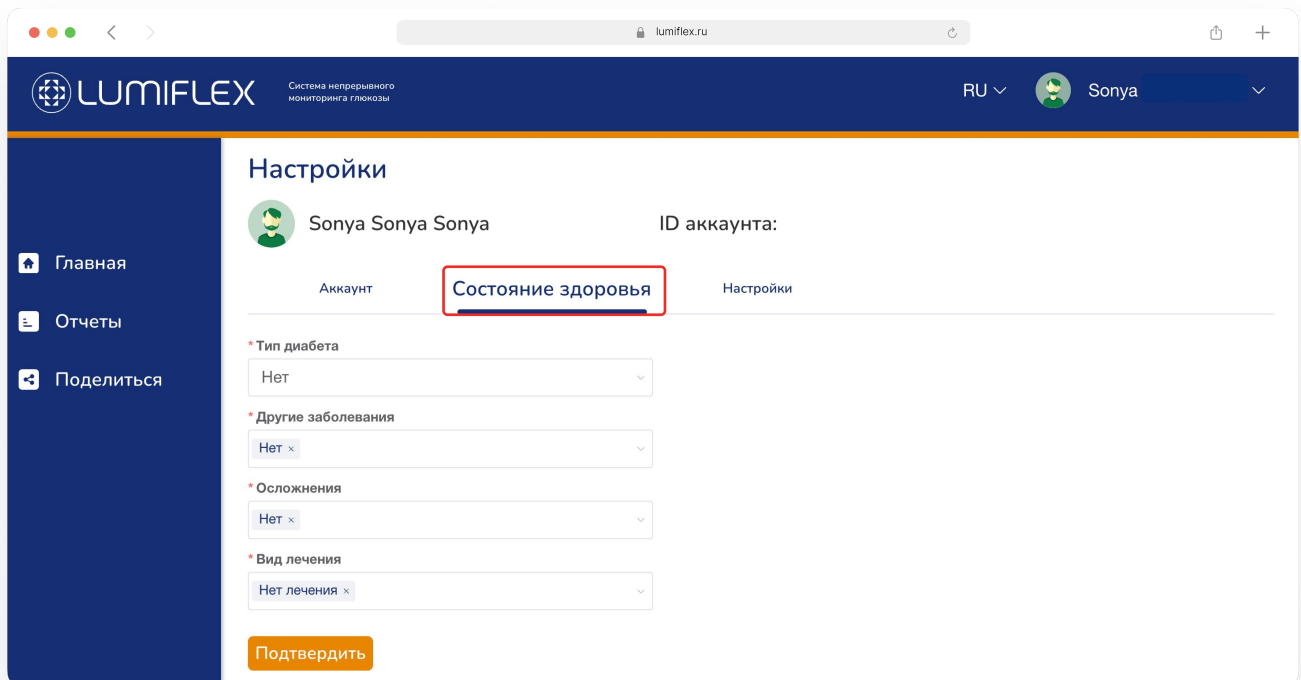

Настройки

Sonya Sonya Sonya ID аккаунта:

Аккаунт **Состояние здоровья** Настройки

\* Тип диабета  
Нет

\* Другие заболевания  
Нет


\* Осложнения  
Нет

\* Вид лечения  
Нет лечения

Подтвердить

## Настройки учетной записи

Вкладка «Настройки» позволяет изменять настройки единиц измерения веб-интерфейса.

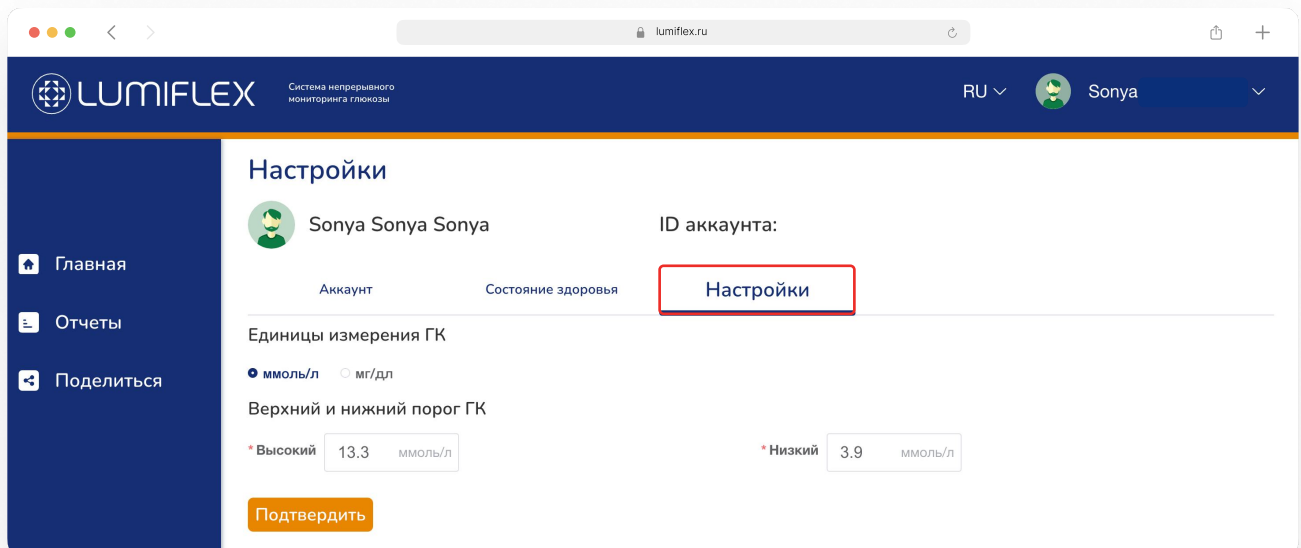

Настройки

Sonya Sonya Sonya ID аккаунта:

Аккаунт Состояние здоровья **Настройки**

Единицы измерения ГК  
☒ ммоль/л ☐ мг/дл

Верхний и нижний порог ГК


\* Высокий 13.3 ммоль/л \* Низкий 3.9 ммоль/л

Подтвердить

# Настройки личного профиля


## Удалить профиль

Удаление профиля означает, что все исторические данные и связанная информация будут безвозвратно удалены.

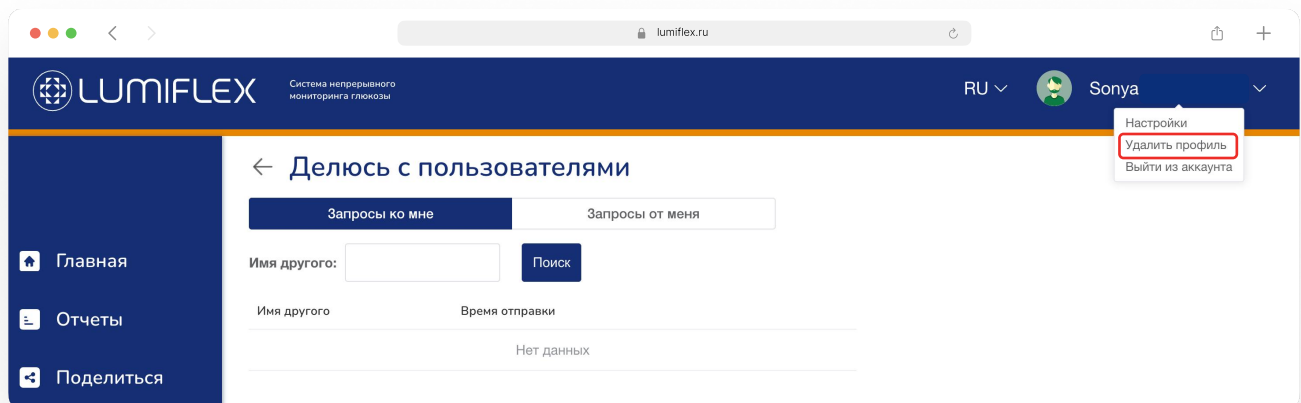

## Выход из аккаунта

Нажмите здесь, чтобы выйти из своей учетной записи.

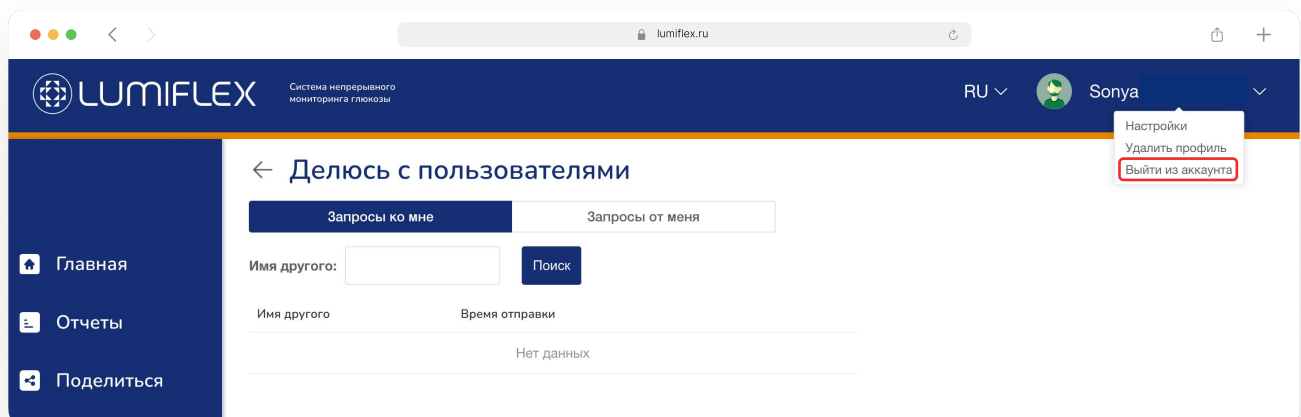

Для оперативной  
поддержки свяжитесь  
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



[help@lumiflex.ru](mailto:help@lumiflex.ru)