

Руководство пользователя Люмифлекс Cloud

Для аккаунта врача

Содержание

1	Предполагаемое использование облачного сервиса Люмифлекс Cloud	1
2	Системные требования и меры предосторожности	2
3	Регистрация в облачном сервисе	3
4	Вход в аккаунт после регистрации	5
5	Добавление нового пациента	6
6	Настройка обмена данными об уровне глюкозы с пациентом	7
7	Авторизация пациента в приложении	8
8	Формирование отчета AGP	9
9	Настройки личного профиля	10
10	Профиль здоровья	11
11	Заметка о визите	12
12	Сравнение данных визитов	13

Предполагаемое использование облачного сервиса Люмифлекс Cloud

Люмифлекс Cloud предназначен для использования медицинскими работниками с целью помощи людям с диабетом и их лечащим врачам в просмотре, анализе и оценке данных с устройств контроля уровня глюкозы за прошедший период времени для более эффективного управления диабетом.

Дополнительно



Люмифлекс Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации.



Люмифлекс Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом.



Медицинские работники должны использовать информацию из облачного сервиса Люмифлекс Cloud в сочетании с другой доступной им клинической информацией.

Системные требования и меры предосторожности

- ✓ Обеспечьте оптимальную производительность и безопасность с помощью правильной настройки.

Системные требования

-  **Поддерживаемые браузеры.** Веб-приложение Люмифлекс Cloud разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для обеспечения полной функциональности необходимо включить JavaScript и разрешить всплывающие окна.
-  **Поддерживаемые операционные системы.** Приложение протестировано для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).
-  **Минимальные аппаратные/программные требования.** Для оптимального отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 1920 × 1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить стабильное интернет-соединение.

Критические меры предосторожности

- 1. Подключение.** Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен поддерживать стабильное интернет-соединение.
- 2. Риски передачи данных.** Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью могут привести к задержке или сбою передачи данных опекунам.
- 3. Питание.** Обеспечивает стабильное питание во время подключения устройства и обработки данных. Не следует использовать платформу при низком уровне заряда батареи.
- 4. Серьезные инциденты.** Немедленно сообщите производителю и соответствующим органам о любых серьезных травмах или смертельных случаях, связанных с устройством.




Регистрация в облачном сервисе




cloud.люмифлекс.рф

Процесс регистрации

1. Перейдите по ссылке на сайт Люмифлекс Cloud и нажмите «Зарегистрироваться».

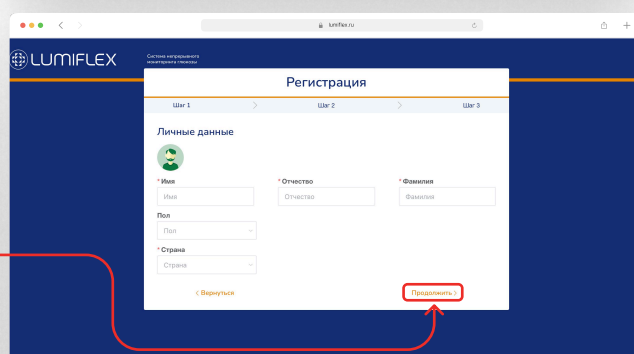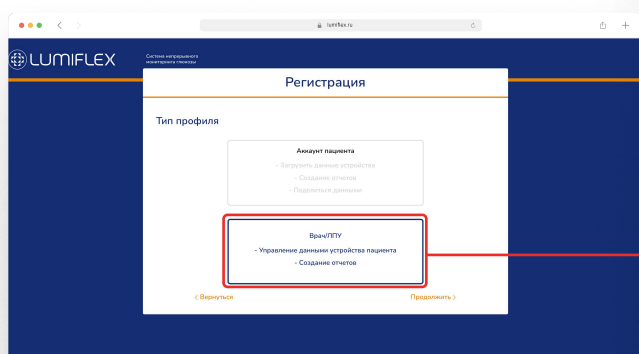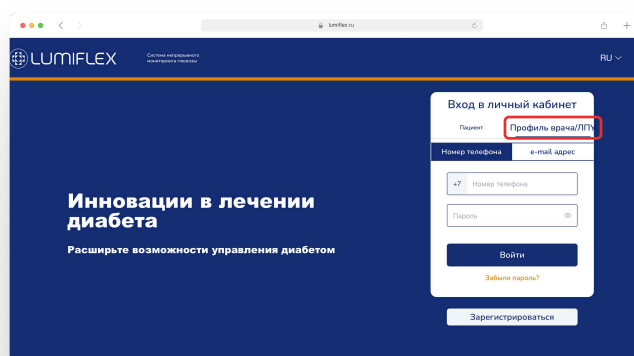


2. Выберите вкладку «Врач/ЛПУ» и введите личную информацию.


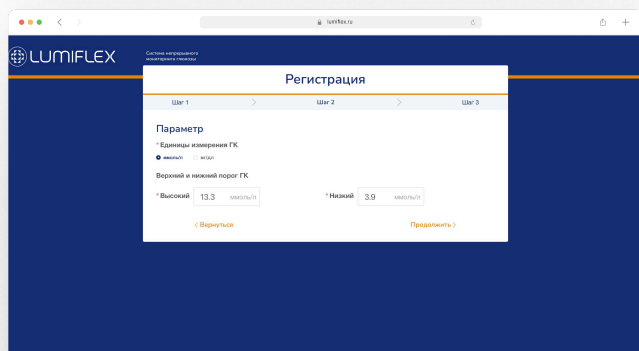


3. Установите предпочтительные единицы измерения и пороговые значения BG (глюкозы в крови) для практики.

Регистрация в облачном сервисе

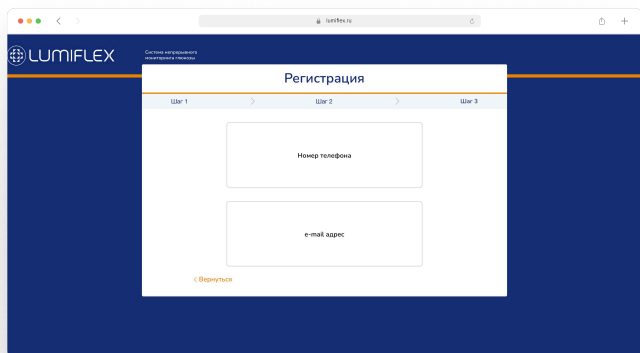

4. Выберите 1 из 2 вариантов регистрации: по номеру телефона или адресу электронной почты — тот, который вам наиболее удобен.

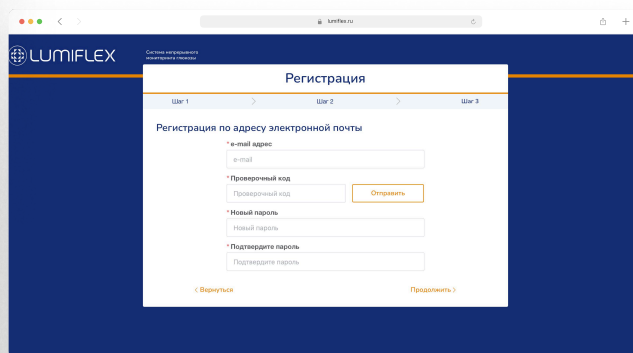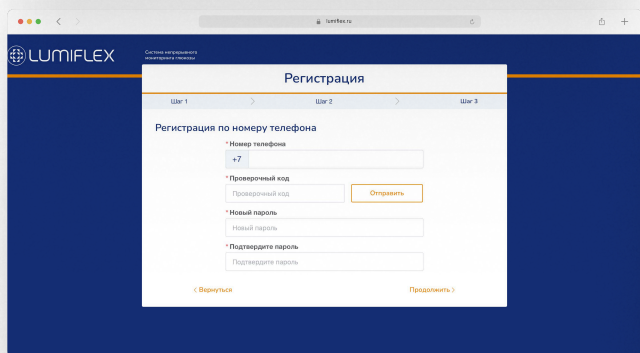

Регистрация по номеру телефона

1. Введите номер телефона.
2. Нажмите кнопку **«Отправить»**. Вам поступит СМС с кодом. Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.

Регистрация по адресу электронной почты


1. Введите ваш имейл-адрес.
2. Нажмите на кнопку **«Отправить»**. Вам поступит письмо с кодом. Введите его в поле **«Проверочный код»**.
3. Введите пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтвердите пароль»**.



Обратите внимание! Для регистрации в приложении используйте только **русский номер** мобильного телефона.

Вход в аккаунт после регистрации

1. Выберите вкладку «Профиль врача/ЛПУ».
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».
3. Введите адрес электронной почты / номер телефона и пароль.
4. Нажмите «Вход в личный кабинет» для доступа к панели управления.

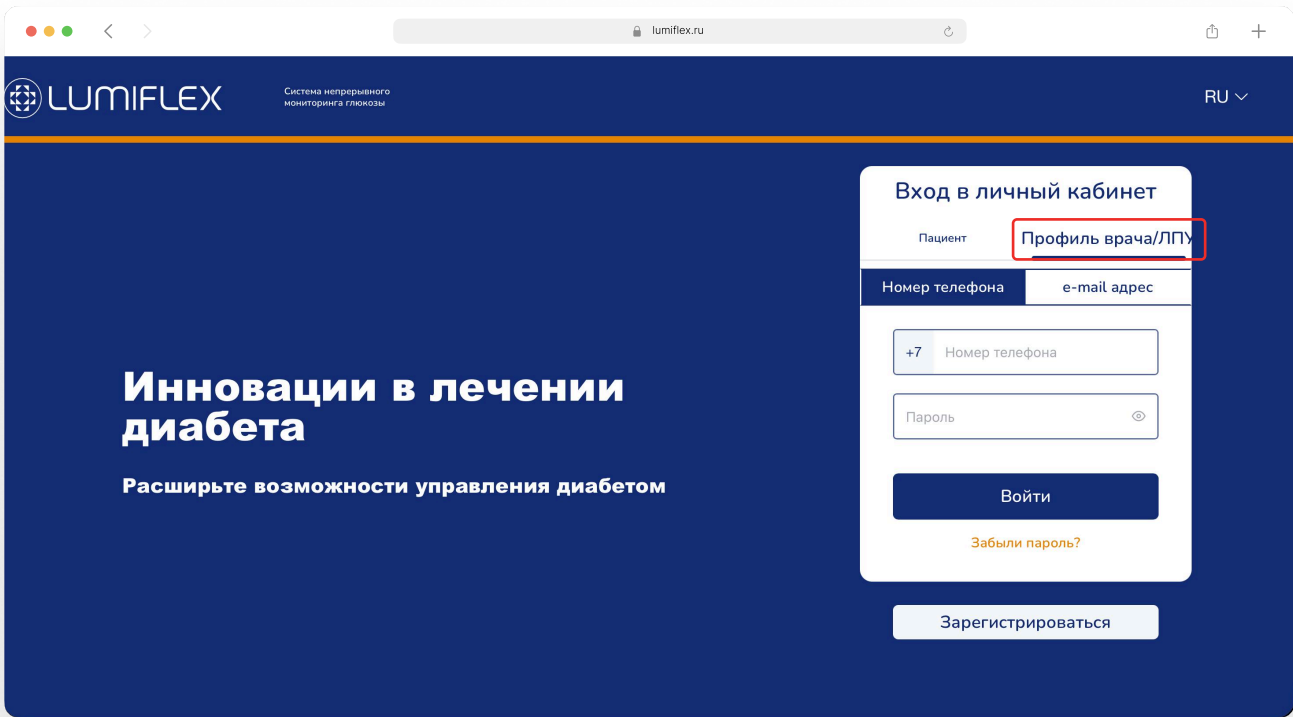
[Забыли пароль?](#)

RU ▾


Забыли пароль

1. Нажмите кнопку «Забыли пароль» и следуйте инструкциям для его сброса.
2. Выберите «Номер телефона» или «Ваш email-адрес».


Сменить язык

Выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов.

Добавление нового пациента

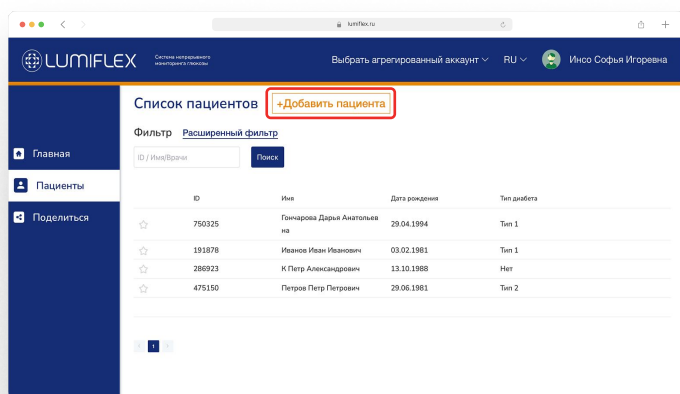

1. Нажмите «Добавить пациента» во вкладке «Пациенты».

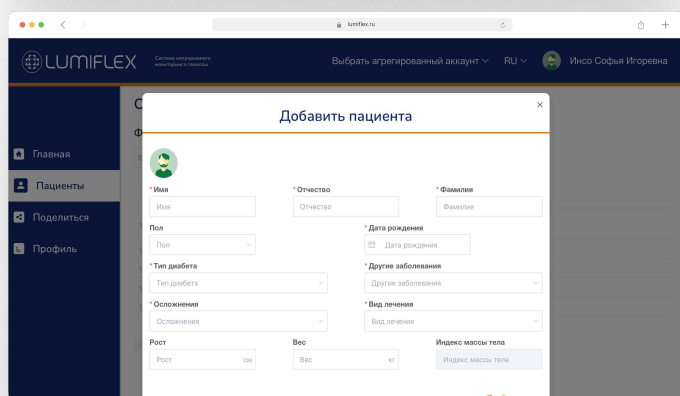

2. Заполните необходимую информацию.

3. Нажмите «Добавить».




После обновления страницы, появится новая строка с ФИО пациента. Теперь нужно настроить обмен данными с пациентом.


Удаление пациента

«Главная» → «Поделиться» → «Удалить».

Настройка обмена данными об уровне глюкозы с пациентом

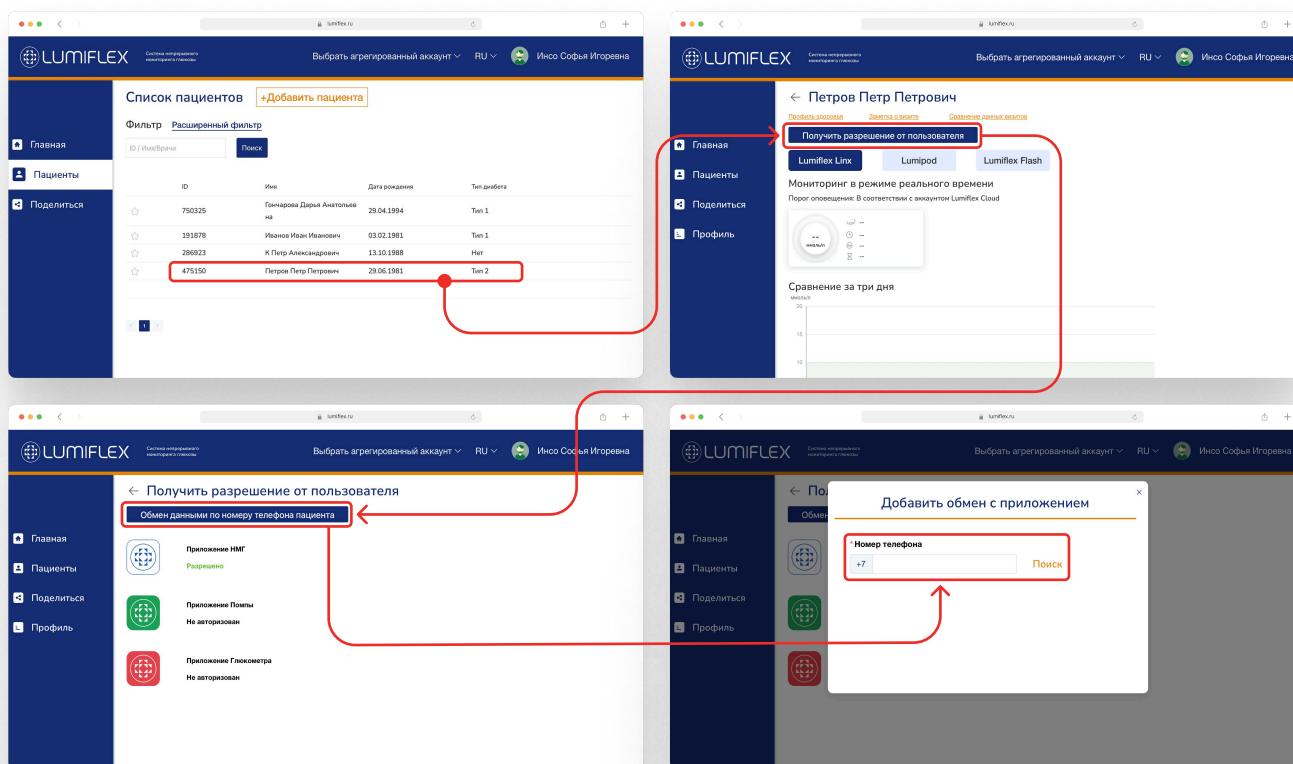


1. Выберите нужного пациента из вашего списка, нажмите на строку с ФИО.
2. Нажмите на кнопку «Получить разрешение от пользователя».
3. Нажмите на кнопку «Обмен данными по номеру телефона пациента».
4. Введите номер телефона пациента, на который пациент зарегистрировал приложение в своем телефоне, и нажмите на кнопку «Поиск».

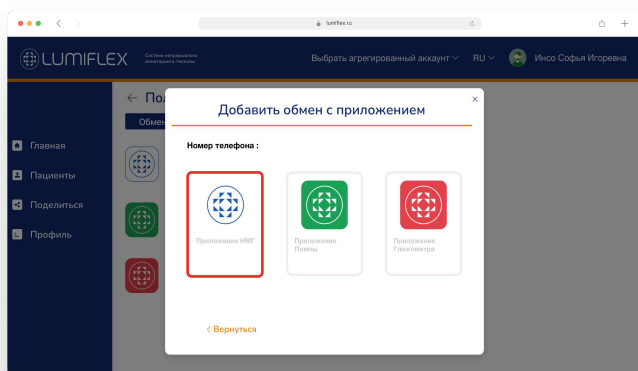

5. Выберите нужное приложение для синхронизации, нажмите на кнопку «Поделиться».
6. Пациенту на телефон поступит SMS, где ему необходимо подтвердить свое согласие на обмен данными.

Авторизация пациента в приложении

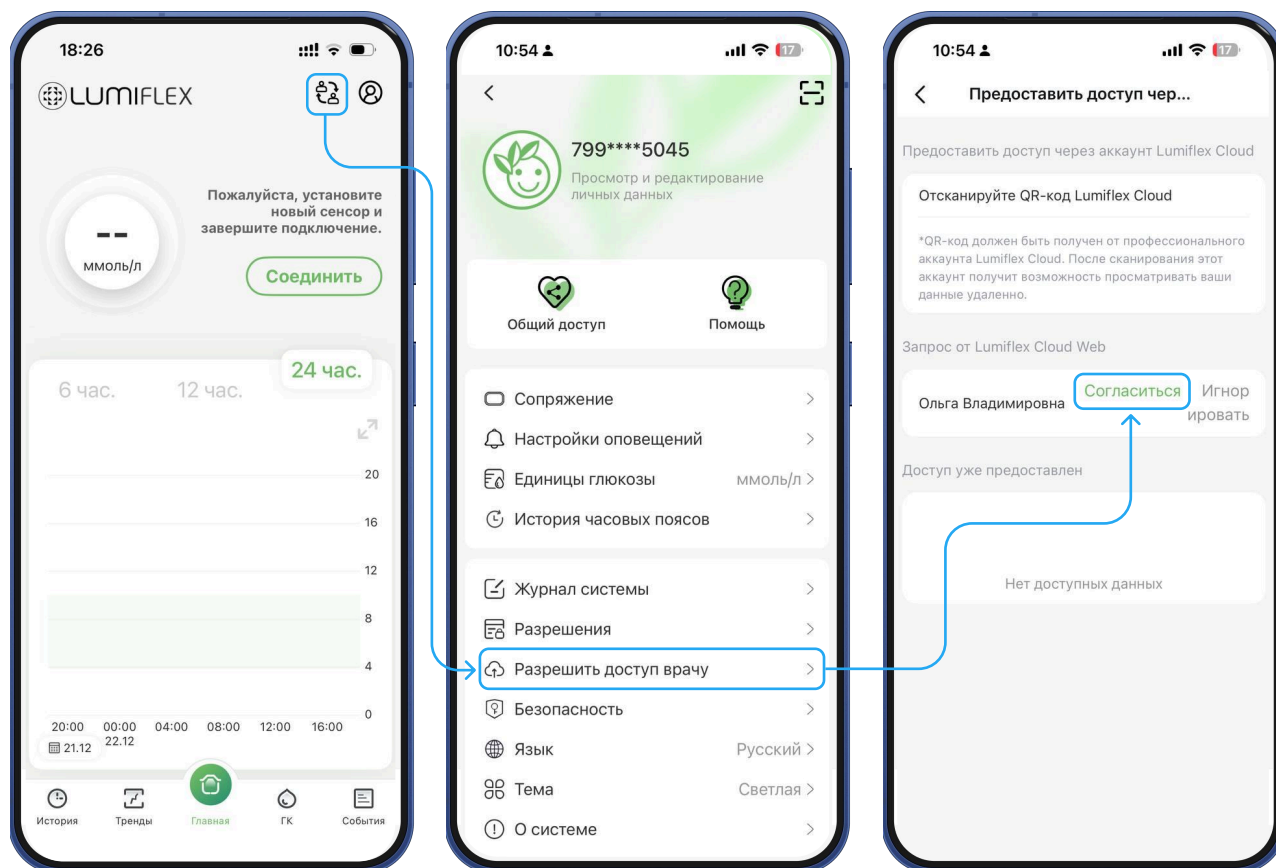


1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.
2. Выберите «Разрешить доступ врачу».
3. Нажмите «Согласиться».




После того как пациент нажмет «Согласиться» в приложении, врач сможет просматривать данные пациента на платформе Люмифлекс Cloud.


Формирование отчета АГР

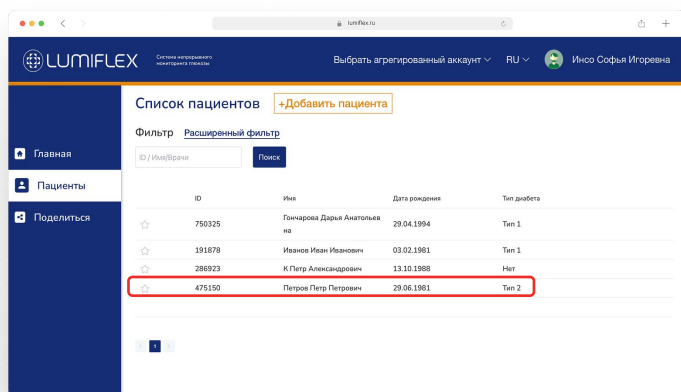

1. Выберите пациента и нажмите на строчку с его ФИО.

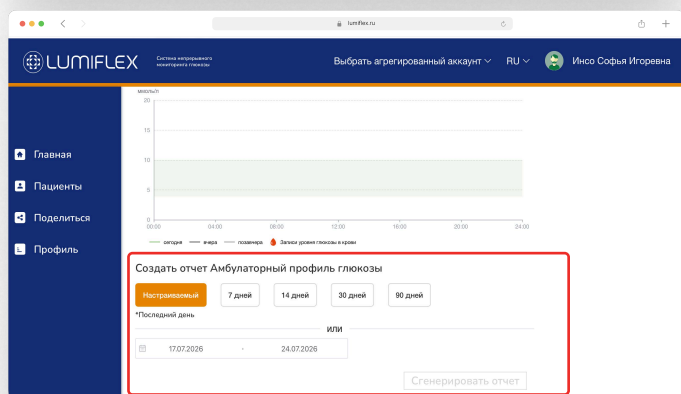

2. Найдите меню отчетов внизу главной страницы пациента.

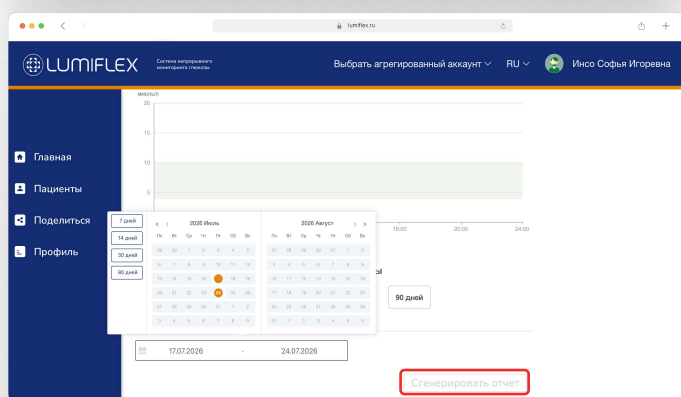

3. Выберите предустановленные диапазоны (7, 14, 30, 90 дней) или настраиваемый период времени.

4. Нажмите **«Сгенерировать отчет»** для комплексного анализа данных.






Отчет не открывается из иконки загрузки отчета в правом верхнем углу экрана. Она является информационной и показывает только время формирования отчета! Сам отчет вы сможете найти на главной странице в разделе «Запись отчета».

Настройки личного профиля

1. Нажмите на значок «**Профиль**» в левой колонке главной страницы, чтобы перейти в меню управления профилем.
2. Добавьте дополнительный вариант входа, отличный от того, по которому вы регистрировались. Если при регистрации вы использовали имейл, то добавьте вход по телефону. И наоборот. После этого вы сможете входить в аккаунт, используя имейл или телефон.




Обратите внимание! Используйте только **российский номер** мобильного телефона.

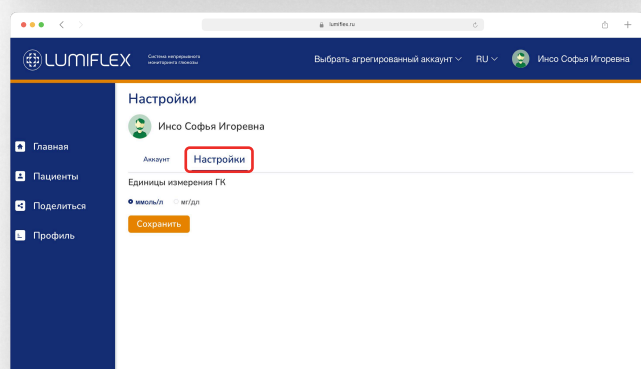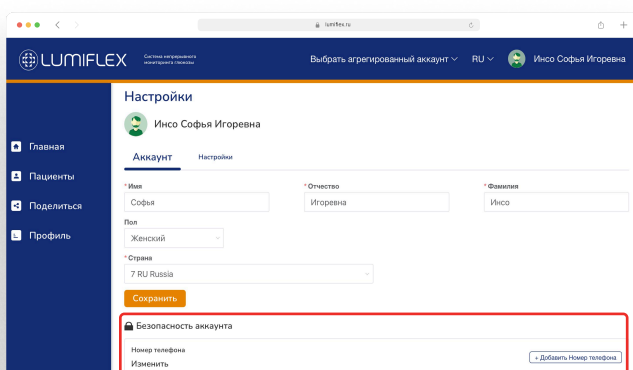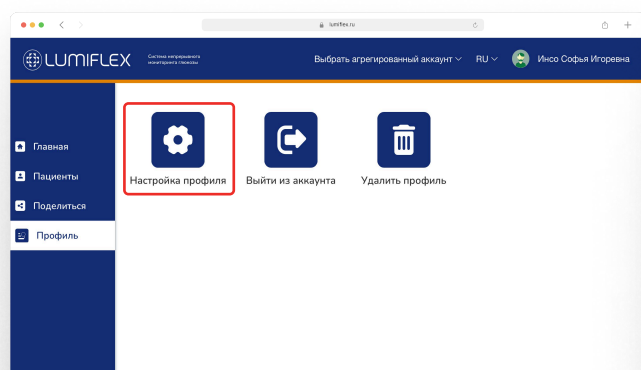

Вкладка «**Настройки**» позволяет изменять параметры, связанные с отображением единиц ГК.


Профиль здоровья

Комплексное отслеживание здоровья пациента
и ведение документации о визитах

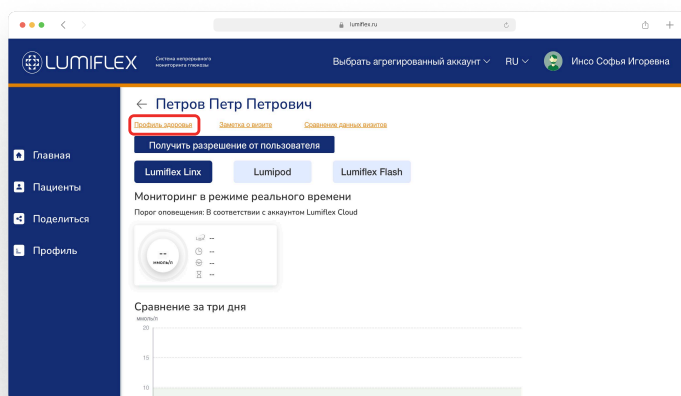

Просмотр комплексной информации о здоровье пациента, введенной при создании аккаунта.

Доступная информация

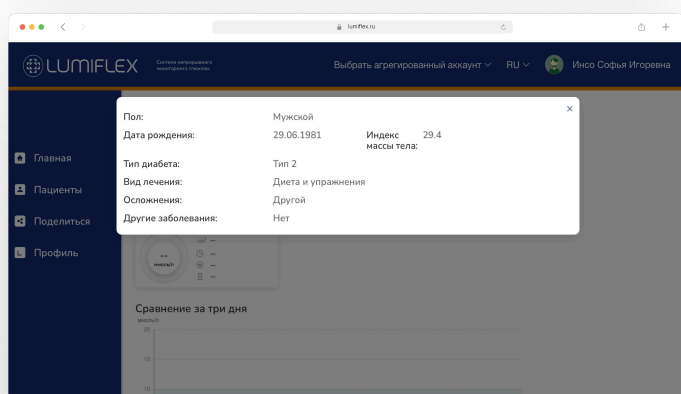


- Пол и дата рождения.
- Тип лечения.
- ИМТ (индекс массы тела).
- Осложнения.
- Тип диабета.
- Другие заболевания.



Вся информация о здоровье отображается так, как она была введена при создании аккаунта.

Заметка о визите

Запись заметок о визитах и медицинских наблюдений для справки пациента

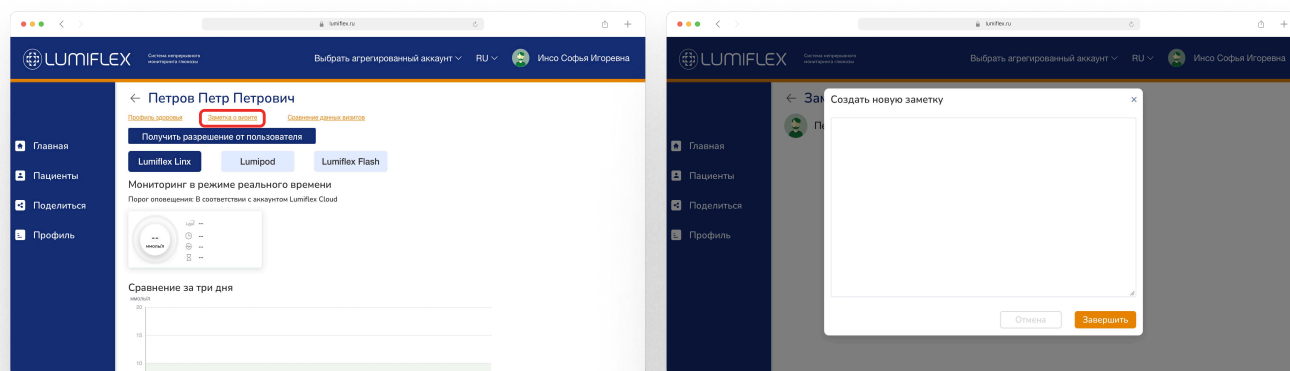

Ключевые особенности

- Добавление заметок в разделе «Заметка о визите».
- Запись медицинских состояний и распоряжений врача.
- «Заметки врача» на главной странице пациента.



Преимущество: улучшает общение между врачами и пациентами.

Сравнение данных визитов

Проведение комплексного сравнения и анализа данных пациента за время визитов.


Процесс

1. Нажмите «Добавить новый визит».
2. Нажмите «Сохранить».
3. Введите информацию о визите.
4. Введите значение eHbA1C.
5. Выберите дату начала и окончания.
6. Запишите план терапии.
7. Установите TIR (время в целевом диапазоне).

Настройки TIR

Трехквартильный диапазон: Высокий, Нормальный, Низкий.

Пятиквартильный диапазон: Очень высокий, Высокий, Нормальный, Низкий, Очень низкий.

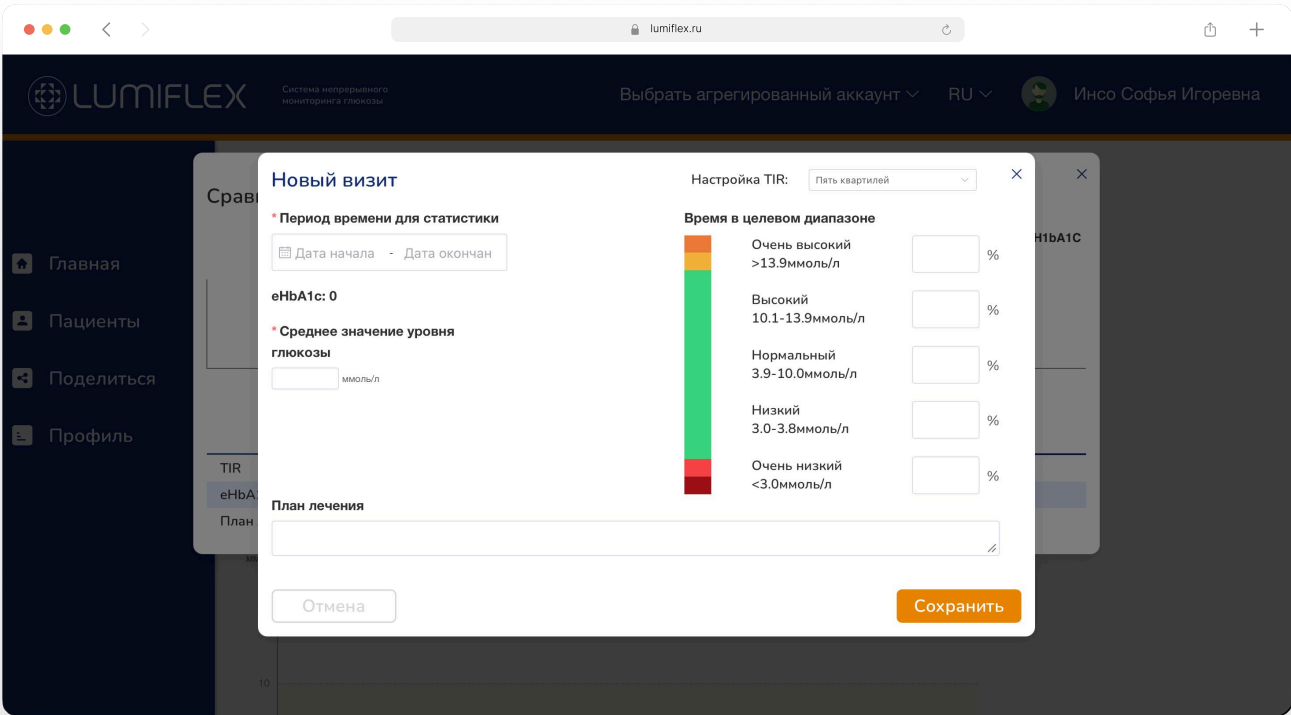

Сравнение данных визитов

ЛUMIFLEX Система непрерывного мониторинга глюкозы

Выбрать агрегированный аккаунт RU Инсо София Игоревна

Главная Пациенты Поделиться Профиль

Новый визит

Настройка TIR: Пять квартилей

*Период времени для статистики

Дата начала - Дата окончан

eHbA1c: 0

*Среднее значение уровня глюкозы ммоль/л

План лечения

Отмена Сохранить

Время в целевом диапазоне

Очень высокий	>13.9ммоль/л	%
Высокий	10.1-13.9ммоль/л	%
Нормальный	3.9-10.0ммоль/л	%
Низкий	3.0-3.8ммоль/л	%
Очень низкий	<3.0ммоль/л	%

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



help@lumiflex.ru